

Veritäplänäyte veritippakortille: näytteenotto- ja lähetysohje

Pahvisen veritippakortin viiteen ympyrään siirretään pipetillä EDTA-putkeen otettua laskimoverta tai kerätään sormenpäältä veritippoja. Verinäyte säilyy tutkimuskelpoisena veritippakortissa kaksi vuotta.


Näytteenoton valmistelu

Liimaa viivakoodillinen näytetunniste korttiin. Avaa kortti, ja vältä koskemasta kortin näytealueita.

Näytteen siirtäminen EDTA-putkesta

Ota potilaasta laskimoverinäyte EDTA-putkeen. Sekoita putkea kääntelemällä 8-10 kertaa. Siirrä noin 70 mikrolitraa (1-2 tippaa) jokaiseen verikortin pyöreään täplään. Mikäli käytettävissä ei ole säädeltävää pipettiä, näytteen voi siirtää myös muovisella kertakäyttöpipetillä. Näytteen tulee osua pyöreälle alueelle, eikä mennä merkittävästi sen reunojen yli, katso kuva 1.

Kuva 1. Oikein veritippakortin näytealueille siirretty näyte:

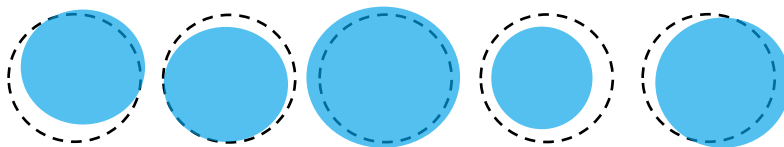

Näytteen ottaminen sormenpäältä:

Valitse sormi, josta otat näytteen. Puhdista sormi desinfiointiaineella.	 Kuva 2.
Tee lansetilla reikä sormenpäähän.	 Kuva 3.
Edistä veritipan muodostumista hieromalla sormea kevyesti. Älä lypsä.	 Kuva 4.
Tiputa veritipat verikortin keräysalueella. Jatka niin kauan, että ympyrät ovat täynnä. Katso kuvasta 2 oikea täyttöaste. Sulje kortin läppä.	 Kuva 5.

Näytteen kuivaaminen

Kun näyte on siirretty kortille, anna veritippakortin kuivua 4 tuntia huoneenlämmössä. Kuivumisen jälkeen näyte säilytetään jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Pakkaa näytekortti erikseen pieneen salpapussiin. Laita salpapussi verinäyteputkien kanssa samaan Vita-pussiin tai Postin lähetyslaatikkoon päällimmäiseksi.